


DE 08 Lochdeckel für Ultraschallbad

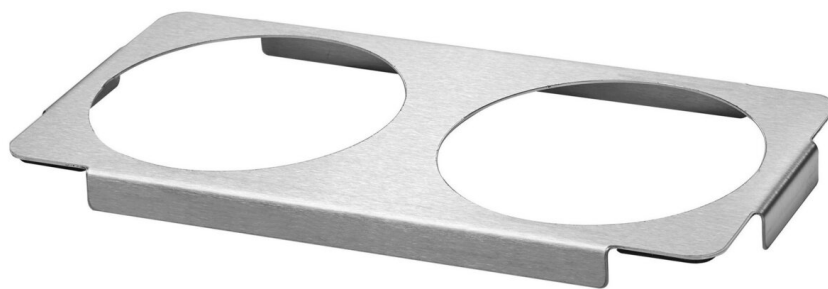

Bei der Anwendung chemisch aggressiver Flüssigkeiten (z.B. TICKOPUR J 80 U), der Entfernung chemisch aggressiver oder abrasiver Verschmutzungen oder der Beschallung von Probenflüssigkeiten werden Einsatzbecher verwendet (indirekte Beschallung). Weil nichts auf den Wannenboden des Ultraschallbades platziert werden darf, bietet BANDELIN passende Lochdeckel/ Einsatzstreifen zur Aufnahme der Einsatzbecher an. Weiterer Vorteil: Es können gleichzeitig mehrere Einsatzbecher mit verschiedenen Flüssigkeiten beschallt werden (z.B. Entfernung von Dental-Zementen mit STAMMOPUR Z in einem und Reinigung bei gleichzeitiger chemischen Desinfektion von zahnärztlichen Instrumenten mit STAMMOPUR DR 8 in einem zweiten Einsatzbecher).

- Edelstahl
- zum Einhängen von 2 Einsatzgefäßen
- Geeignet für RK 31/H

Artikel-Nr.

WL10477

Products for the electronic industry



Modell	DE 08
Hersteller	BANDELIN
Hersteller-Artikel-Nr.	278
GPSR Herstellerdaten	BANDELIN electronic GmbH & Co. KG Heinrichstrasse 3-4 DE-12207 Berlin www.bandelin.com
Länge	210 mm
Breite	105 mm
Höhe	11 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück