


SONOREX Einhängkorb für Ultraschallbad, Edelstahl, 170 x 65 x 50 mm

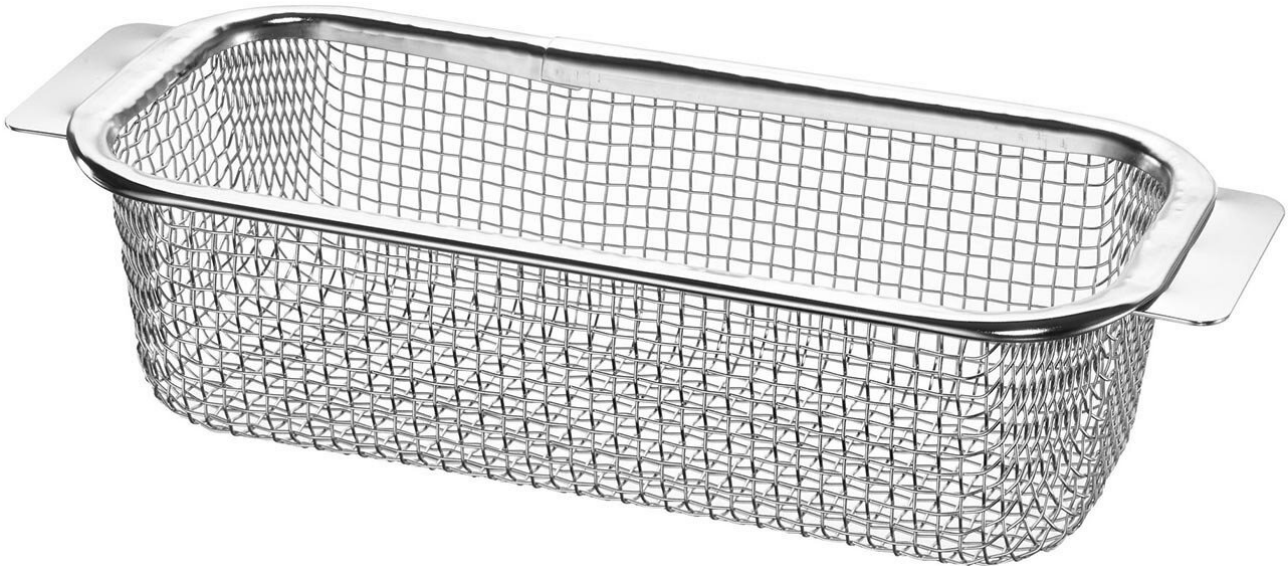

Während der Ultraschall-Reinigung darf das Reinigungsgut nicht auf den Wannenboden gelegt werden, da es aufgrund der Vibrationen der Schwingsysteme zu einem Abrieb zwischen dem Reinigungsgut und der Wanne selbst kommen kann. Es wird daher der Einsatz eines passenden Reinigungskorbes empfohlen. Die BANDELIN-Reinigungskörbe sind so konstruiert, dass sich das Reinigungsgut stets im optimalen Bereich des Kavitationsfeldes (1-2 cm vom Boden entfernt) in der Wanne befindet. Mithilfe eines Korbes kann das Reinigungsgut außerdem komfortabel im Gerät platziert und nach der Reinigung zur Spülung entnommen werden, ohne dass der Anwender mit der Reinigungs- bzw. Desinfektionsflüssigkeit in Kontakt kommt.

- passend für: DT: 31 /H, RK: 31 /H
- lichte Maschenweite: 4 x 4 mm
- Zum Einhängen

Artikel-Nr.	WL10478
Modell	K 08
Hersteller	BANDELIN
Hersteller-Artikel-Nr.	209
GPSR Herstellerdaten	BANDELIN electronic GmbH & Co. KG Heinrichstrasse 3-4 DE-12207 Berlin

www.bandelin.com

Länge	170 mm
Breite	65 mm
Höhe	50 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück

