


SONOREX Einhängkorb für Ultraschallbad, Edelstahl, 200 x 110 x 40 mm

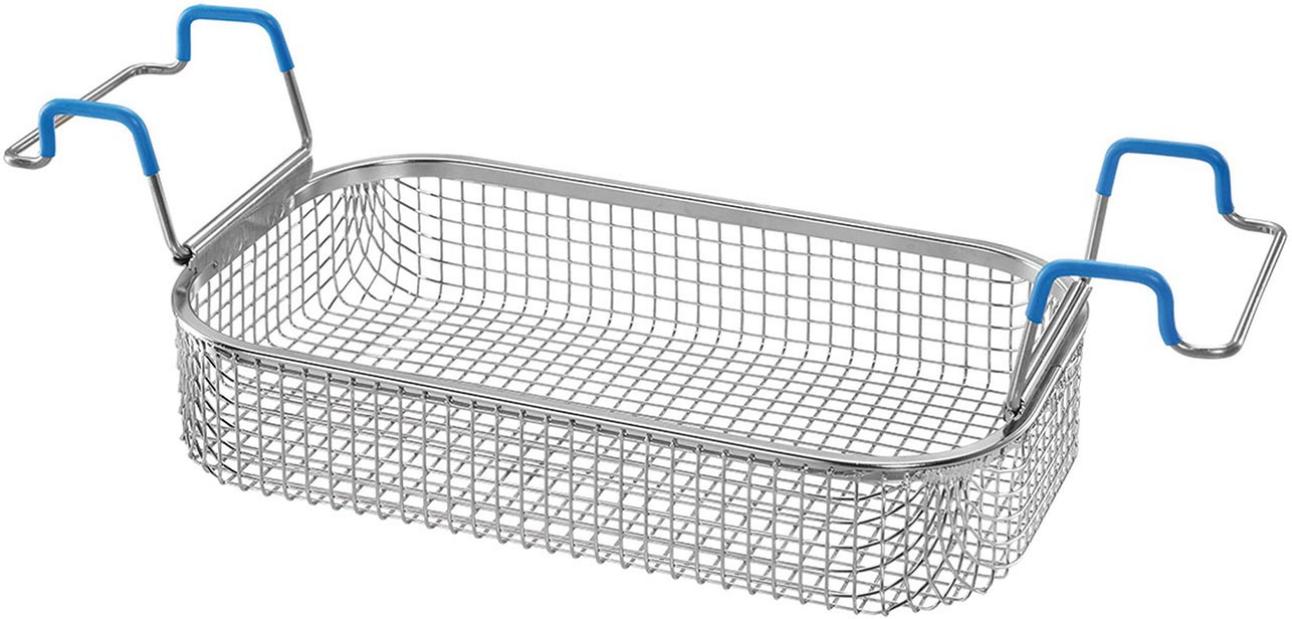

Während der Ultraschall-Reinigung darf das Reinigungsgut nicht auf den Wannenboden gelegt werden, da es aufgrund der Vibrationen der Schwingsysteme zu einem Abrieb zwischen dem Reinigungsgut und der Wanne selbst kommen kann. Es wird daher der Einsatz eines passenden Reinigungskorbes empfohlen. Die BANDELIN-Reinigungskörbe sind so konstruiert, dass sich das Reinigungsgut stets im optimalen Bereich des Kavitationsfeldes (1-2 cm vom Boden entfernt) in der Wanne befindet. Mithilfe eines Korbes kann das Reinigungsgut außerdem komfortabel im Gerät platziert und nach der Reinigung zur Spülung entnommen werden, ohne dass der Anwender mit der Reinigungs- bzw. Desinfektionsflüssigkeit in Kontakt kommt.

- passend für:
- DL: 102
- HDK: 102
- PDT: 100 /H, 102 H /H-RC
- RK: 100 /H /SH, 102 H /CH
- lichte Maschenweite: 5 x 5 mm
- zum Einhängen

Artikel-Nr. WL10482

Modell K 3C

Products for the electronic industry



Hersteller	BANDELIN
Hersteller-Artikel-Nr.	3025
Länge	200 mm
Breite	110 mm
Höhe	40 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück