


SONOREX Einhängkorb für Ultraschallbad, Edelstahl, 455 x 245 x 50 mm

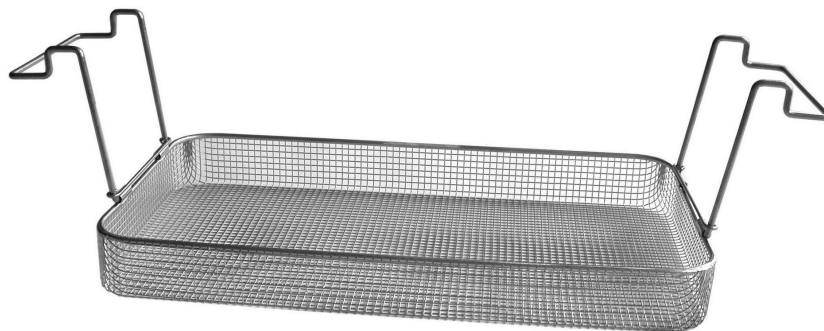

Während der Ultraschall-Reinigung darf das Reinigungsgut nicht auf den Wannenboden gelegt werden, da es aufgrund der Vibrationen der Schwingsysteme zu einem Abrieb zwischen dem Reinigungsgut und der Wanne selbst kommen kann. Es wird daher der Einsatz eines passenden Reinigungskorbes empfohlen. Die BANDELIN-Reinigungskörbe sind so konstruiert, dass sich das Reinigungsgut stets im optimalen Bereich des Kavitationsfeldes (1-2 cm vom Boden entfernt) in der Wanne befindet. Mithilfe eines Korbes kann das Reinigungsgut außerdem komfortabel im Gerät platziert und nach der Reinigung zur Spülung entnommen werden, ohne dass der Anwender mit der Reinigungs- bzw. Desinfektionsflüssigkeit in Kontakt kommt.

- passend für:
- DL: 1028 H
- DT: 1028 /H
- RK: 1028 /H

- zum Einhängen

Artikel-Nr.	WL18157
Modell	K 28
Hersteller	BANDELIN
Hersteller-Artikel-Nr.	358
GPSR Herstellerdaten	BANDELIN electronic GmbH & Co. KG Heinrichstrasse 3-4 DE-12207 Berlin www.bandelin.com
Länge	455 mm
Breite	245 mm
Höhe	50 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Inkl. Batterie	nein