


SD 05 Inserto per bicchiere cpl. per bagno a ultrasuoni

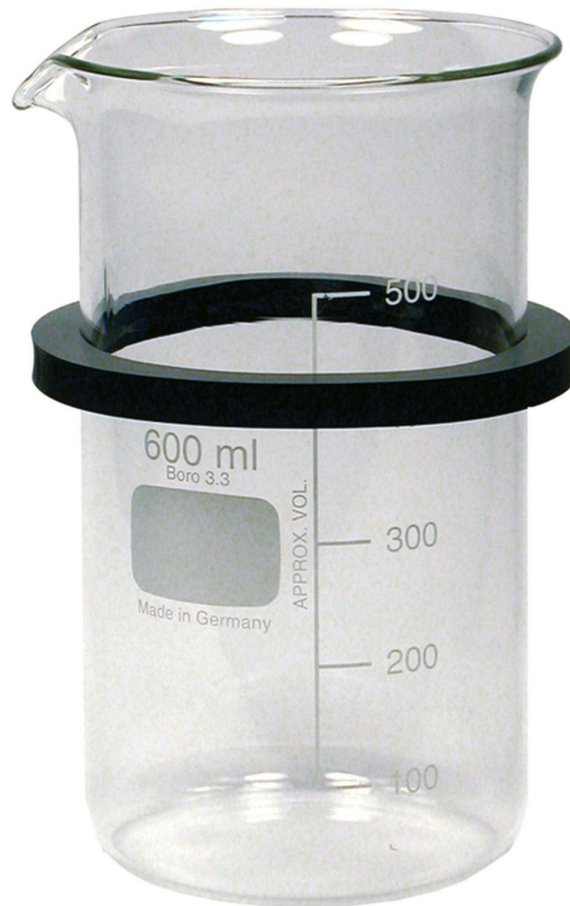

Vetro, 600 ml, da agganciare alla striscia perforata di copertura/inserto con anello GR 04. I becher con inserto sono utilizzati per l'applicazione di liquidi chimicamente aggressivi (ad es. TICKOPUR J 80 U), la rimozione di contaminanti chimicamente aggressivi o abrasivi o la sonicazione di liquidi campione (sonicazione indiretta). Poiché non è possibile collocare nulla sul fondo del bagno a ultrasuoni, BANDELIN offre coperchi/strisce di inserto perforati adatti a contenere i becher di inserzione. Un altro vantaggio: diverse coppette possono essere sonicate contemporaneamente con liquidi diversi (ad esempio, rimozione di cementi dentali con STAMMOPUR Z in una coppetta e pulizia con disinfezione chimica simultanea di strumenti dentali con STAMMOPUR DR 8 in una seconda coppetta). Si noti che per trasmettere gli ultrasuoni al bicchiere dell'inserto è necessario ridurre la tensione superficiale dell'acqua e quindi utilizzare una soluzione detergente (ad es. TICKOPUR R 33 3%) come liquido di accoppiamento/di contatto.

□ per appendere il coperchio perforato DE08

□ per RK 31 / RK 31 H

□ P = 76 mm, H = 110 mm

- Capacità = 400 ml
- Vetro, completo di anello di fissaggio
- Per la pulizia indiretta di piccole parti.

Articolo n.	WL10498
Modello	SD 05
Produttore	BANDELIN
Codice articolo del produttore	575
Dati del produttore GPSR	BANDELIN electronic GmbH & Co. KG Heinrichstrasse 3-4 DE-12207 Berlin www.bandelin.com
Lunghezza	76 mm
Larghezza	80 mm
Altezza	150 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No

